


DOUCHE DE SECURITE



REFERENCE : EDE-623-250

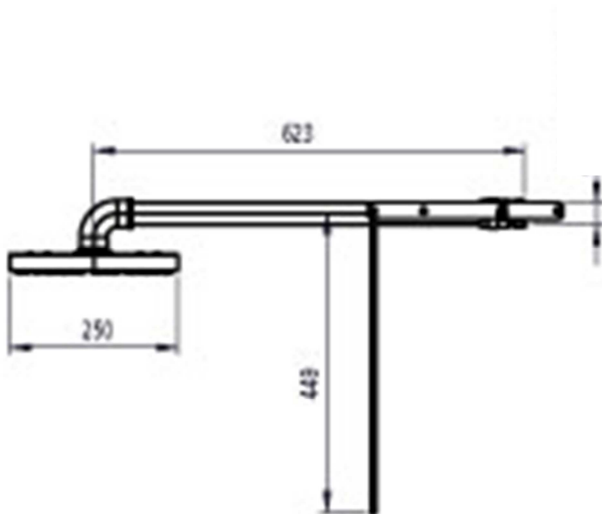

Douche de sécurité horizontale murale encastrée à commande manuelle. Système incongelable.

Pomme de douche circulaire Ø 250 mm en ABS vert avec un débit 90 l./min à 1 bar statique (140 l./min à 3 bar statique). Alimentation en eau F 1".

Tuyauterie en acier galvanisé, finition époxy gris; tringle à poignée triangulaire en laiton, finition époxy vert.

Livré avec plaque signalétique normalisée « douche de 1er secours ».

Garantie 10 ans type Douche de sécurité horizontale murale encastrée.



DOUCHETTE D'YEUX 1 SORTIE





REFERENCE : EDY-198-26

Douchette d'yeux 1 sortie, à commande manuelle par gâchette avec poignée ergonomique en ABS vert, finition chromé.

Tête d'aspersion équipée d'un cache de protection en ABS vert éjectable automatiquement à la mise en eau.

Débit 16 l/mn à 3 bar avec aérateur double filtre inox. Livré avec plaque signalétique normalisée "Lave-yeux de 1er secours".

Garantie 10 ans. Type Douchette d'yeux 1 sortie.

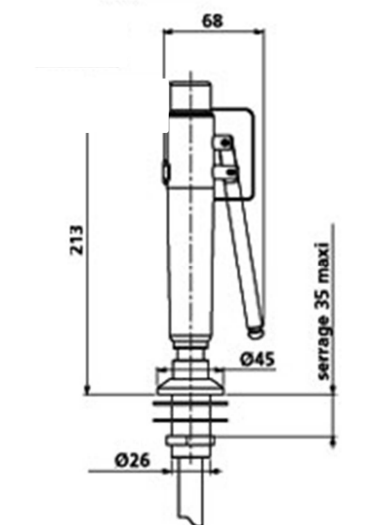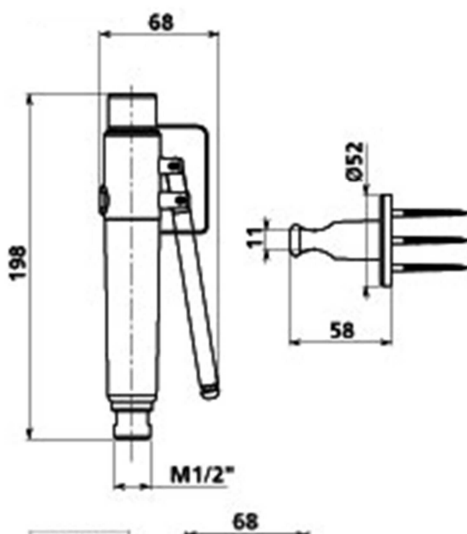

DOUCHETTE D'YEUX 2 SORTIE





REFERENCE : EDY2-198-26

Douchettes d'yeux 2 sorties, à commande manuelle par gâchette avec poignée ergonomique en ABS vert, finition chromé.

Têtes d'aspersion équipées de caches de protection en ABS vert éjectables automatiquement à la mise en eau.

Débit 15l/mn à 3 bar avec aérateur double filtre inox. Livré avec plaque signalétique normalisée "Lave-yeux de 1er secours".

Garantie 10 ans. Type Douchette d'yeux 2 sorties.

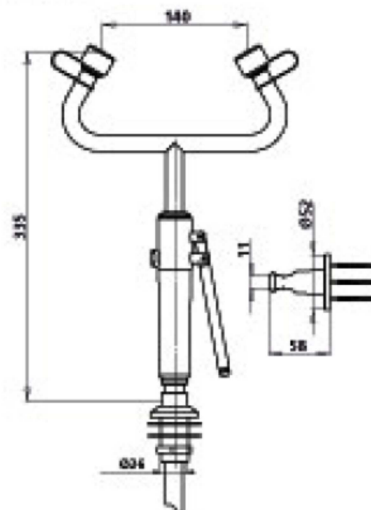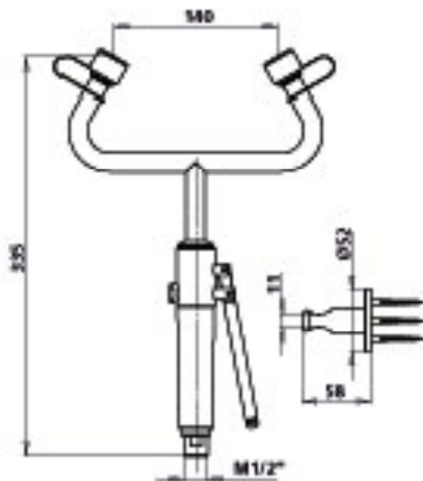

DOUCHETTE YEUX MURAL





REFERENCE : ELM-180-250

Lave-yeux mural avec vasque, à commande manuelle par palette à main inox AISI 430, finition époxy vert, vanne $\frac{1}{4}$ de tour en laiton chromé.

Vasque Ø 250 mm en inox AISI 430 finition époxy vert. Têtes d'aspersion équipées de caches de protection en ABS vert éjectables automatiquement à la mise en eau.

Débit 20 l/min à 3 bar, aérateurs double filtre inox. Alimentation en eau M 1/2". Tuyauterie en acier galvanisé, finition époxy gris; palette à main en acier, finition époxy vert. Fixation murale par platine en laiton (vis non fournies).


Livré avec plaque signalétique normalisée « lave-yeux de 1er secours ». Garantie 10 ans. Type Lave-yeux sur colonne avec vasque.

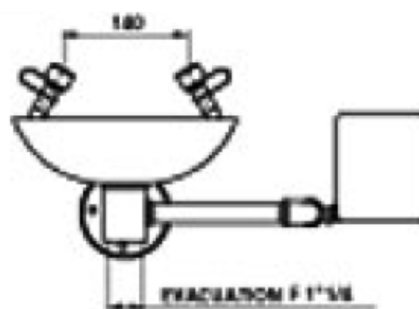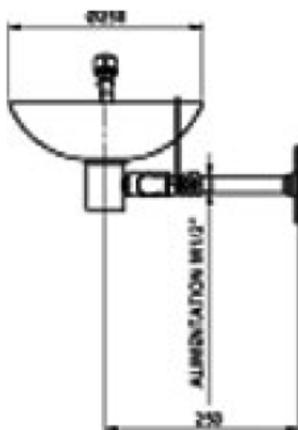

LAVE YEUX SUR COLONNE



REFERENCE : ELC-1500-250

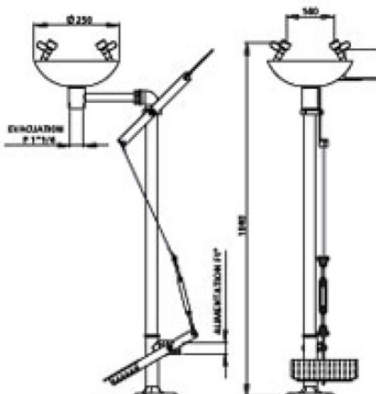

Lave-yeux sur colonne avec vasque.
Commande au pied par pédale en laiton
finition époxy vert, fermeture automatique par
ressort ou commande manuel par palette à
main inox, vanne
¼ de tour en laiton.

Têtes d'aspersion équipées de caches de
protection en ABS vert éjectables
automatiquement à la mise en eau, chaînettes
inluses. Débit 17 l/mn à 3 bar avec aérateurs.

Vasque Ø 250 mm en acier inoxydable, finition
époxy vert.

Tuyauterie en acier galvanisé, finition époxy
gris.


Montage au sol sur embase triangulaire.

Livré avec plaque signalétique normalisée
« lave-yeux de 1er secours ». Garantie 10 ans.
Type Lave-yeux sur colonne avec
Vasque.

COMBINE DE DOUCHE ET LAVE YEUX



REFERENCE : EDLY-1980-300

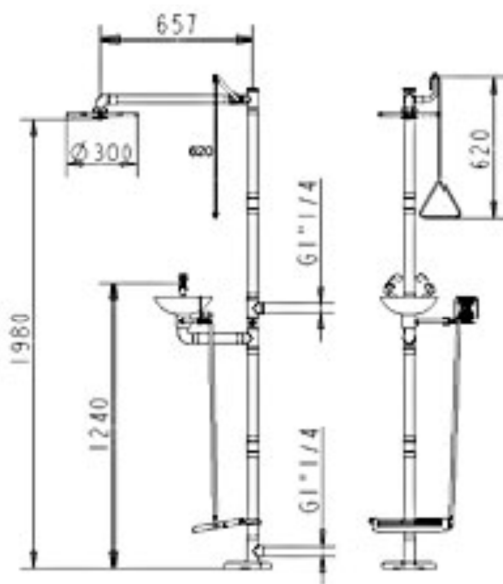

Combiné de douche de sécurité et lave-yeux sur colonne, à commandes manuelles ou au pied. Système incongelable.

Vasque Ø 250 mm en inox AISI 430 teinté vert. Têtes d'aspersion du lave-yeux équipées de caches de protection en ABS vert éjectables automatiquement à la mise en eau.

Débit 20l/min à 3 bar, aérateurs double filtre inox. Pomme de douche circulaire Ø 250 mm en ABS vert. Débit 90 l./min à 1 bar statique (140l./min à 3 bar statique). Alimentation en eau F 1".

Tuyauterie en acier galvanisé, finition époxy gris; tringle à poignée triangulaire en laiton, finition époxy vert; palette à main et pédale en acier, finition époxy vert.

Fixation au sol par platine triangulaire en laiton (vis non fournis). Plaques signalétiques normalisées "douche" et "lave-yeux" de 1er secours fournis.

Garantie 10 ans. Livré avec plaques signalétiques normalisées « douche et lave-yeux de 1er secours ». Type Combiné de douche de sécurité et lave-yeux sur colonne.


SORBONNES



Les sorbonnes sont des enceintes ventilées en dépression, ce qui permet d'aspirer l'air dans un local et le rejeter dans l'atmosphère extérieure au moyen d'un ventilateur.

Il s'agit d'équipements de protection collective destinés principalement à protéger les opérateurs des risques d'inhalation de produits chimique dangereux.

Les sorbonnes assurent la protection des opérateurs contre les polluants gazeux et particulaires, à l'exclusion des micro-organismes et des particules radioactives.

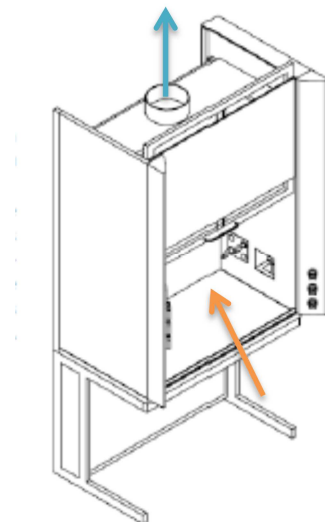

PSM (POSTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE)




Ce sont des appareils ventilés qui assurent une protection de l'opérateur ainsi que l'environnement vis-à-vis des agents biologiques pathogènes, par une ventilation qui s'oppose à leur sortie en direction de l'opérateur et une filtration à très haute efficacité de l'air avant son rejet.

Selon la norme européenne EN12469, il existe trois types de PSM :


- PSM type I
- PSM type II
- PSM type III

Ce qui différencie ces trois types de PSM est les moyens technologiques mis en œuvre et les niveaux de protection.


Filtre 
 Air propre 
 Air contaminé 

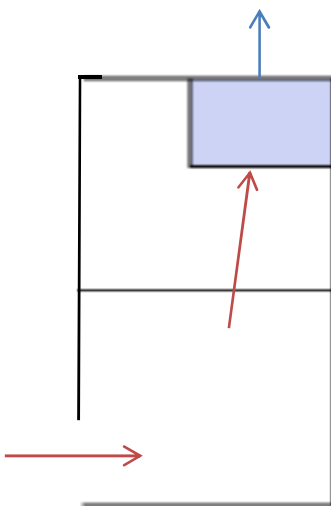

PSM TYPE I

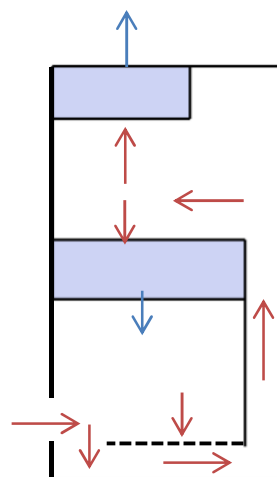

PSM TYPE II

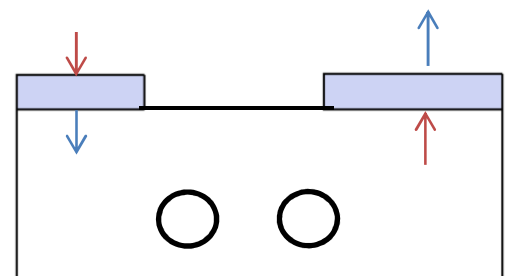

PSM TYPE III


HOTTES A FILTRATION



Les hottes permettent aux opérateurs d'avoir un espace de travail sécurisé pour les manipulations des produits chimiques.

Plus économique et plus faciles à installer que les sorbonnes, ce système assure l'extraction des polluants sans aucun raccordement extérieur et sans problèmes de compensation d'air dans la pièce.

Grace à son filtre dédié à des applications particulières, elle répond aux standards mondiaux les plus exigeants.

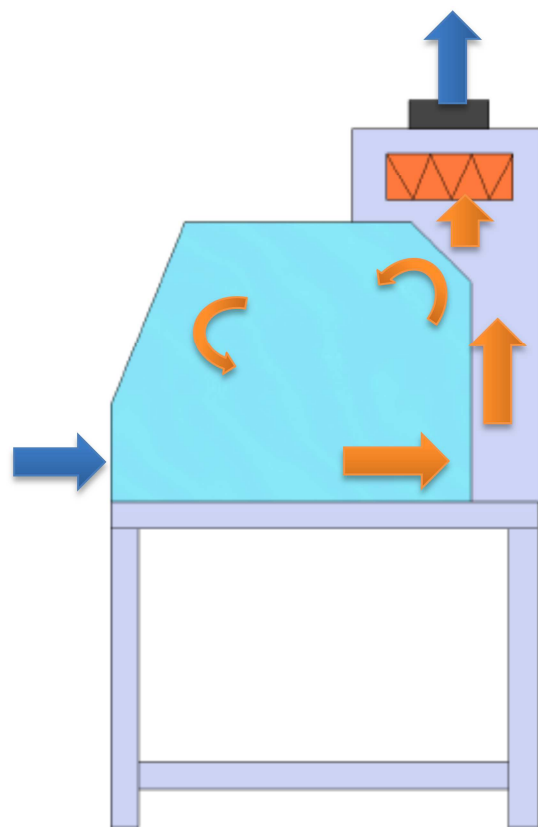

ARMOIRES DE STOCKAGE



Armoire de sécurité à ventilation filtrante destinées au stockage des :

- Produits nocifs.
- Produits toxiques.
- Produits inflammables.
- Acides et bases.

Les vapeurs nocives confinées dans l'armoire de sécurité sont aspirées par le caisson de ventilation et purifiées lors de leur passage dans le filtre à charbon actif