

**Mini centrifugeuse
vétérinaire
FUGEVET**




mini centrifugeuse vétérinaire FUGEVET

mini centrifugeuse pour vétérinaire: **FUGEVET**

La mini centrifugeuse Fugevet est spécialement conçue pour le secteur vétérinaire. Aux rotors angulaire et à bande communément utilisés sur ce type de mini centrifugeuse, est ajouté un rotor pour tubes à micro-hématocrite adapté à la détermination de l'hématocrite du sang animal.

Avec un design léger et compact, son fonctionnement est doux et très silencieux même à hautes vitesses. Elle est fournie d'un système de sécurité électrique dans le couvercle qui permet d'arrêter immédiatement le rotor dans le cas d'une ouverture accidentelle ou involontaire.

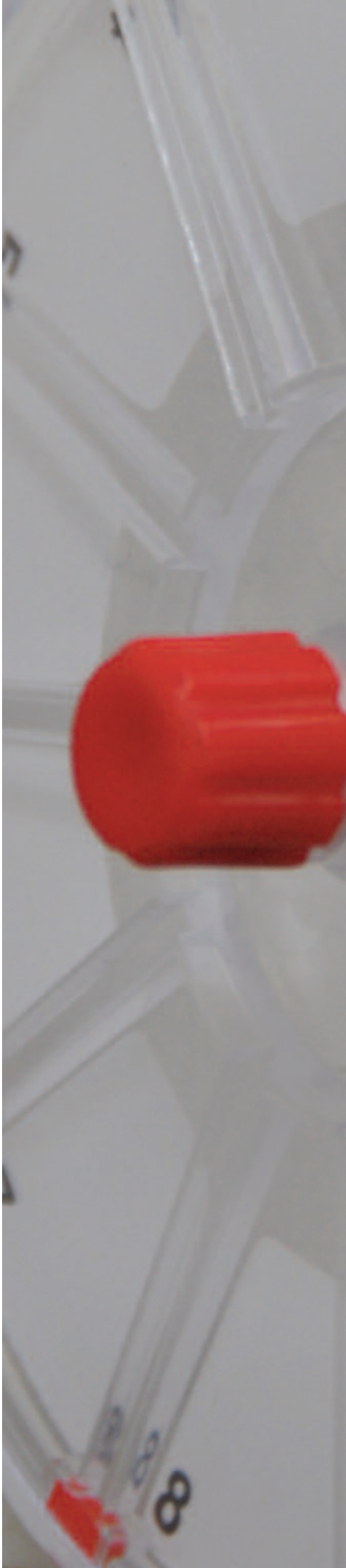

centrifugeuse FUGEVET: Caractéristiques de l'équipement



- [1]** Rotor pour 12 tubes micro-hématocrite
- [2]** 2 rotors angulaires de capacité 4 ou 6 micro-tubes de 1.5/2.0 mL avec adaptateurs inclus pour micro-tubes de 0.5 mL et 0.2 mL
- [3]** Rotor à bandes pour micro-tubes de 0.2 mL
- [4]** Léger, très silencieux et stable, fourni avec pieds à ventouse
- [5]** Couvercle transparent pour vérifier à tout moment l'état du rotor
- [6]** Commutateur 100-240V

[1] Rotor pour 12 tubes micro-hématocrite




[2] 2 rotors angulaires pour 4 ou 6 micro-tubes 1.5/2.0 mL avec adaptateurs pour 0.5 ml et 0.2 mL micro-tubes



[3] Rotor à bandes pour micro-tubes de 0.2 mL



centrifugeuse FUGEVET: parties de l'appareil

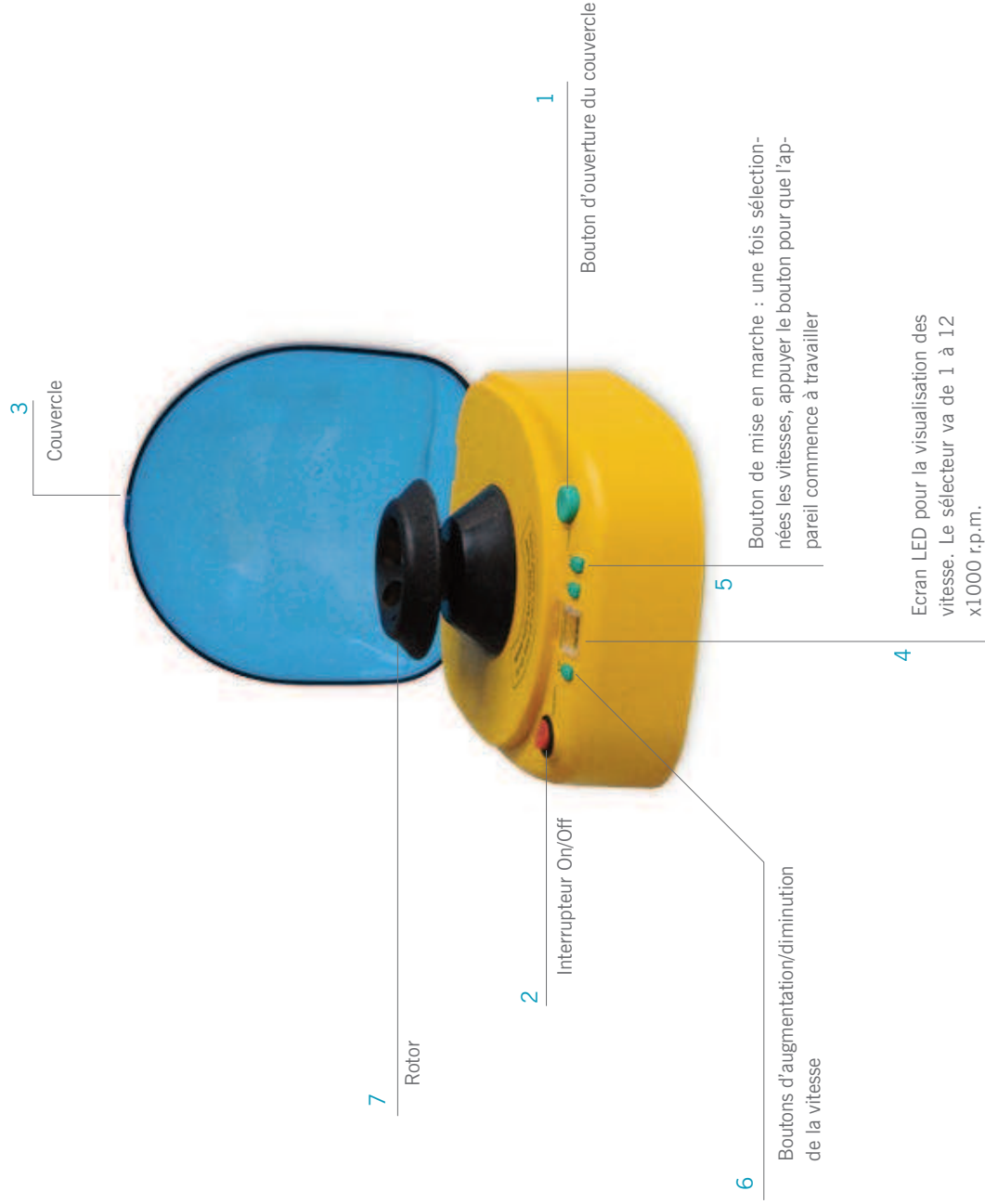

centrifugeuse FUGEVET: partie arrière



Détail de la prise de courant

centrifugeuse FUGEVET: Spécifications techniques



Référence	52507050
Gamme vitesse	1000-12000 rpm (De 1000 en 1000 r.p.m.)
Rotor	Rotor pour 12 tubes micro-hématocrite Rotor pour 6 tubes : 6 x 1,5mL, 6 x 0,2mL*, 6 x 0,5mL* Rotor pour 4 tubes: 4 x 1,5 mL, 4 x 0,5 mL*, 5 x 0,2 mL* Rotor à bande (8x0,2 mL)
Alimentation	100-240 V AC 50-60Hz
Dimensions approx.	175 x 145 x 130 mm
Poids approx.	1 Kg

* Avec les adaptateurs inclus